

СОДЕРЖАНИЕ

Важные меры предосторожности	39
Описание изделия	41
Перед началом использования	43
Очистка, поиск и устранение неисправностей ирригатора Waterpik®	45
Ограниченная гарантия на два года	46

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При использовании электрических изделий, особенно в присутствии детей, необходимо всегда соблюдать основные меры предосторожности, включая нижеследующие.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Чтобы снизить риск получения травмы:

- Не направляйте поток воды под язык, в ухо, нос или другие деликатные области. Это изделие может вырабатывать давление, способное серьезно повредить такие области.
- Пользуйтесь изделием исключительно по инструкции или в соответствии с рекомендациями вашего зубного врача.

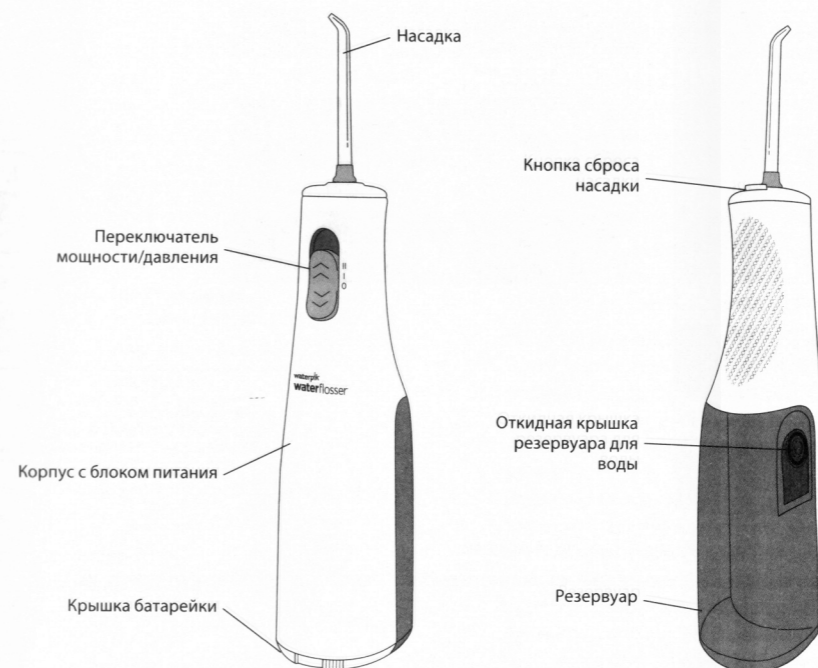
- Не используйте литиевые батарейки для этого прибора. Эти батарейки способны производить давление, которое может вызвать неудобство в использовании и повредить прибор. Использование литиевых батареек приведет к аннулированию гарантии.
- Пользуйтесь только теми насадками и аксессуарами, которые рекомендованы Water Pik, Inc.
- Не роняйте и не помещайте посторонние объекты в любое отверстие изделия.
- Не используйте данное изделие на открытом воздухе, не включайте его в местах, где используются аэрозоли (спреи) или применяется кислород.

- Не используйте в данном изделии физиологический раствор (раствор соли) и нерастворимые в воде эфирные масла. Их использование снижает производительность изделия и сокращает срок его службы.
- Перед использованием этого изделия снимите все украшения полости рта.
- Не пользуйтесь изделием, если есть открытая рана на языке или во рту.
- Если ваш врач предписал пользование антибиотиком для премедикации перед началом процедур полости рта, посоветуйтесь с ним о возможности использования данного изделия или любого другого изделия для гигиены полости рта.
- Не рекомендуется использование изделия детьми младше 8 лет. Тщательно обучите и контролируйте правильное использование данного изделия детьми в возрасте от 8 до 12 лет, а также лицами с особыми потребностями
- Следите, чтобы дети не играли с этим устройством.

- Данное изделие не имеет элементов, подлежащих обслуживанию со стороны покупателя, и не требует регулярного технического обслуживания.
- Наполняйте резервуар только теплой водой или другим рекомендованным профессиональным стоматологическим раствором.

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ.

Ирригаторы полости рта Waterpik предназначены для массажа тканей десен, удаления зубного налета и улучшения здоровья десен. Ирригаторы Waterpik обеспечивают уникальное сочетание давления и пульсации воды для очистки промежутков между зубами и десневых карманов, удаление вредных бактерий и налета, чего не может обеспечить традиционная чистка зубов щеткой и зубной нитью. Мощный пульсирующий напор воды смывает остатки пищи, осуществляет массаж тканей десен, что способствует приливу крови к тканям пародонта, оздоравливает десны и борется с их кровоточивостью.



Замена каждые 3 месяца	
 Ортодонтическая насадка	ПОДХОДИТ ДЛЯ: <input checked="" type="checkbox"/> брекетов <input checked="" type="checkbox"/> общего использования
 Периодонтическая насадка Pik Pocket®	ПОДХОДИТ ДЛЯ: <input checked="" type="checkbox"/> периодонтальных карманов <input checked="" type="checkbox"/> фуркации
 Насадка для удаления налета Plaque Seeker®	ПОДХОДИТ ДЛЯ: <input checked="" type="checkbox"/> имплантов <input checked="" type="checkbox"/> мостов <input checked="" type="checkbox"/> коронок <input checked="" type="checkbox"/> общего использования
 Насадка в виде зубной щетки	ПОДХОДИТ ДЛЯ: <input checked="" type="checkbox"/> общего использования

ПРИМЕЧАНИЕ: не все насадки входят в комплект каждой модели.

Запасные насадки/аксессуары можно приобрести у вашего местного дистрибьютора, адрес которого можно найти на www.waterpik.com/intl.

Замена каждые 6 месяцев	
 Обычная насадка для струйной чистки	ПОДХОДИТ ДЛЯ: <input checked="" type="checkbox"/> общего использования
 Насадка для чистки языка	ПОДХОДИТ ДЛЯ: <input checked="" type="checkbox"/> ухода за языком

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Замена батареек

- 

Снимите резервуар для воды.
- 

Поверните крышку батарейки влево из положения «закрыто» в положение «открыто» и откройте крышку прибора.
- 

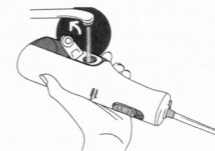
Вставьте 3 AA батарейки, как показано на рисунке.
- 

Устанавливая крышку батарейного отсека на место, убедитесь, что стрелки на ней находятся друг напротив друга, затем нажмите и поверните.

Меняйте батарейки, когда заметите нежелательное изменение в работе прибора.

Наполнение резервуара

Поднимите откидывающуюся крышку и наполните резервуар теплой водой.



Присоединение и отсоединение насадок

Вставьте насадку в центр выступа, которым оканчивается корпус ирригатора. Если насадка закрепилась правильно, цветное кольцо установится встык с выступом. Для того, чтобы отсоединить насадку от корпуса, нажмите на кнопку сброса и потяните насадку от себя.

Настройка и регулирование давления

Вы можете регулировать давление ирригатора, щелкая переключатель мощности/давления на ручке. Для низкого давления (I) установите переключатель мощности вверх на 1 деление и на 2 деления до отметки – для высокого давления (II).



Рекомендуемый порядок использования

Низко наклонитесь над раковиной и поместите насадку в рот. Направьте насадку на зубы и включите устройство. Для достижения лучших результатов, начинайте с задних зубов и постепенно переходите к передним. Плавно скользите насадкой вдоль линии десны и ненадолго задерживайте ее между зубами. Продолжайте, пока не очистите внутреннюю и внешнюю поверхность верхних и нижних зубов. Направьте струю в сторону десны под углом 90 градусов. **Слегка прикройте рот, чтобы вода не разбрызгивалась**, но так чтобы она могла свободно стекать в раковину. Для получения наилучших результатов при пользовании изделием держите его вертикально.



Когда вы закончили

Выключите устройство – Выкл. Влейте остатки жидкости из резервуара.

При желании резервуар для воды можно снять с ручки прибора скользящим движением вниз к основанию прибора.

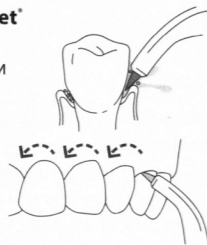
Для того, чтобы заменить резервуар в корпусе, просто потяните его кверху изделия.

ПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКАМИ**Периодонтическая насадка Pik Pocket®**

Периодонтическая насадка Pik Pocket® разработана специально для глубокой чистки периодонтических карманов водой или противомикробными средствами.

При использовании насадки Pik Pocket®, установите **самый низкий уровень давления**.

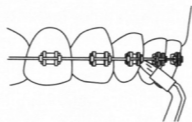
Поднесите мягкую насадку к зубу под углом 45 градусов и осторожно поместите ее под десну, в карман. Включите устройство и перемещайте насадку вдоль линии десны.

**Насадка для чистки языка**

При использовании насадки для чистки языка, установите самый низкий уровень давления, поместите насадку посередине языка и включите ирригатор. Перемещайте насадку вперед, слегка надавливая. При желании можно увеличить давление.

**Ортодонтическая насадка**

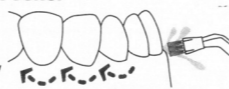
При использовании ортодонтической насадки осторожно перемещайте ее вдоль линии десны, задерживаясь для очистки участка между зубами и вокруг ортодонтической скобы, затем переходите к следующему зубу.

**Насадка в виде зубной щетки**

Поместите насадку в виде зубной щетки в рот, при этом щетка должна быть на зубах у линии десны. Эту насадку можно использовать как с зубной пастой, так и без нее. Включите ирригатор, чтобы вода проходила через насадку. Настройте **слабое давление** (щетина не должна гнуться). Чистите зуб легкими покачивающими движениями, так же, как и при чистке обычной щеткой, затем переходите к следующему зубу.

**Насадка для удаления налета Plaque Seeker®**

При использовании насадки Plaque Seeker®, установите ее таким образом, чтобы щетка слегка касалась зуба. Плавно ведите насадку вдоль десен, уделяя немного больше внимания чистке межзубных промежутков и позволяйте воде проходить между зубами.

**ОЧИСТКА, ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ИРРИГАТОРА WATERPIK®****Использование ополаскивателя для рта и других растворов**

Ирригатор Waterpik® может использоваться для подачи ополаскивателя и антибактериальных растворов. После использования любого специального раствора прополощите устройство для предотвращения загрязнения – для этого частично наполните резервуар теплой водой, включите устройство, направив насадкой в раковину, и подождите, пока не выйдут все жидкости.

Очистка

Никогда не погружайте устройство в воду. При необходимости очищайте внешнюю поверхность устройства мягкой тканью и безабразивным чистящим средством.

Для легкой очистки, резервуар для воды можно снять и помыть в посудомоечной машине. Рекомендуется раз в неделю снимать и чистить резервуар для воды.

Удаление известкового налета

В зависимости от минерального состава используемой воды в приборе могут накапливаться известковые осадки. Если их не удалять, это может ухудшить работу прибора. Чистка внутренних деталей: добавьте 2 столовые ложки белого уксуса в резервуар, наполненный теплой водой. Направьте ручку и насадку прибора в раковину. Включите устройство и слейте всю жидкость из резервуара. Прополощите, еще раз наполнив резервуар чистой теплой водой.

Для поддержания оптимального качества работы прибора эту процедуру следует проводить раз в 1-3 месяца.

Уход за батарейками класса AA и утилизация использованных батареек

- Можно использовать щелочные батарейки и перезаряжаемые батарейки NiMH.
- При установке батареек необходимо соблюдать их полярность.
- Отработанные батарейки следует достать из ирригатора и правильно их утилизировать.
- Не допускается короткое замыкание контактов питания.
- Не выбрасывайте батарейки в огонь.
- Тип и качество используемых батареек AA повлияет на качество работы прибора.
- Производите замену всех батареек одновременно батарейками одного типа и марки.
- Заменяйте батарейки, когда заметите нежелательное изменение в работе прибора.
- Удалите батарейки, если в течение длительного времени не будете пользоваться прибором.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: использование литиевых батареек приведет к аннулированию гарантии и повреждению прибора.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ДВА ГОДА**Услуги по ремонту**

Ирригатор Waterpik® не имеет подлежащих ремонту электрических частей и не требует текущего ремонта. Все вопросы по обслуживанию направляйте вашему местному дистрибьютору, адрес которого можно найти на www.waterpik.com/intl. Пожалуйста, не присылайте изделие в офисы Waterpik International, Inc. – это замедлит обслуживание.

Некоторые запасные насадки и аксессуары для ирригатора можно приобрести у вашего местного дистрибьютора, адрес которого можно найти на www.waterpik.com/intl.

Необходимо указывать номер серии и номер модели во всех запросах. Соответствующие номера находятся на обратной стороне ручки и на нижней части резервуара.

Все еще есть вопросы? Адрес вашего местного дистрибьютора можно найти на www.waterpik.com/intl.

Компания Water Pik, Inc. предоставляет первоначальному покупателю/владельцу этого устройства гарантию качественного изготовления и отсутствия в устройстве дефектов материала сроком на два года с даты приобретения. Сохраните ваш гарантийный талон для подтверждения даты покупки. Компания Water Pik, Inc. сохраняет за собой право на возврат устройства для анализа, с целью подтверждения жалобы, подпадающей под наши гарантийные обязательства. Мы заменим любую часть устройства, которая, по нашему мнению, является неисправной, при условии, что устройство эксплуатировалось правильно, использовалось по назначению, не было изменено или повреждено после покупки и использовалось в соответствии с этими инструкциями. Ремонт или обслуживание, предусмотренные гарантией, будут осуществляться местным дистрибьютором, информация о котором представлена на сайте [www.waterpik.com/intl]. По запросу потребителя по электронной или обычной почте будет предоставлена копия гарантии и полная информация о местном дистрибьюторе. Эта гарантия не распространяется на принадлежности или расходные материалы, такие как насадки и т.д.

Эта гарантия предоставляет вам определенные законные права. У вас также могут быть другие права в зависимости от закона страны, в которой вы проживаете.

Адрес местного дистрибьютора можно узнать на сайте www.waterpik.com/intl.

Средний срок службы ирригатора Waterpik® (WF-02E) составляет 3 года, хотя он может изменяться в зависимости от того, как используется устройство.